

Utiliser, stocker et transporter des produits dangereux – avec
les récipients de sécurité Rötzmeier en acier inoxydable

Récipients de sécurité



Bidon de sécurité (1 litre) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision avec fermeture automatique (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-01DU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (1 litre) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-01T

Accessoires à commander:

- Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1
- Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROTP1
- Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence polie	ROT-01D
Référence non polie	ROT-01DU
Volume	1 litre
Hauteur	235 mm
Diamètre	111 mm
Filetage	1¼"
Poids	0,702 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Coupe de trempage ROT-P1 Bouchon fileté 1¼" ROT-K125
Pièces détachées	Bec doseur ROT-D125 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Bidon de sécurité (2 litres) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision avec fermeture automatique (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-02DU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (2 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-02T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 2 l ROT-P2

Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence polie	ROT-02D
Référence non polie	ROT-02DU
Volume	2 litres
Hauteur	235 mm
Diamètre	131 mm
Filetage	1¼"
Poids	0,800 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Coupe de trempage ROT-P2 Bouchon fileté 1¼" ROT-K125
Pièces détachées	Bec doseur ROT-D125 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Bidon de sécurité (5 litres) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision avec fermeture automatique (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-05DU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-05T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1
Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence polie	ROT-05D
Référence non polie	ROT-05DU
Volume	5 litres
Hauteur	400 mm
Diamètre	165 mm
Filetage	1¼"
Poids	1,200 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Bouchon fileté 1¼" ROT-K125
Pièces détachées	Bec doseur ROT-D125 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Bidon de sécurité (1 litre) avec bouchon fileté

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-01KU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (1 litre) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-01T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P1

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence polie	ROT-01K
Référence non polie	ROT-01KU
Volume	1 litre
Hauteur	235 mm
Diamètre	111 mm
Filetage	1¼"
Poids	0,650 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Coupe de trempage ROT-P1 Bec doseur ROT-D125
Pièces détachées	Bouchon fileté 1¼" ROT-K125 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Bidon de sécurité (2 litres) avec bouchon fileté

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-02KU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (2 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-02T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P2

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence polie	ROT-02K
Référence non polie	ROT-02KU
Volume	2 litres
Hauteur	295 mm
Diamètre	131 mm
Filetage	1¼"
Poids	0,750 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Coupe de trempage ROT-P2 Bec doseur ROT-D125
Pièces détachées	Bouchon fileté 1¼" ROT-K125 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Bidon de sécurité (5 litres) avec bouchon fileté

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte
Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-05KU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-05T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1
Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence polie	ROT-05K
Référence non polie	ROT-05KU
Volume	5 litres
Hauteur	400 mm
Diamètre	165 mm
Filetage	1¼"
Poids	1,150 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Bec doseur ROT-D125
Pièces détachées	Bouchon fileté 1¼" ROT-K125 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Mouilleur (1 litre)

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Pour humidifier, mouiller ou tremper des pièces, chiffons ou du papier d'une manière contrôlée

Dispositif de pompage intégré, le liquide excédent retombe dans le bidon

Coupe de trempage avec ressort

Dispositif pare-flammes dans la coupe de trempage

Disponible également en modèle poli avec poignée en aluminium

Accessoires à commander:

- Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1
- Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125
- Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence non polie	ROT- SP1
Volume	1 litre
Hauteur	270 mm
Diamètre (bidon/soucoupe)	111 / 120 mm
Filetage	1¼"
Poids	0,850 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	non
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Bec doseur ROT-D125 Bouchon fileté 1¼" ROT-K125
Pièces détachées	Coupe de trempage ROT-P1 Dispositif anti-flamme FS125
Code tarif de douane	73102990

Mouilleur (2 litres)

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Pour humidifier, mouiller ou tremper des pièces, chiffons ou du papier d'une manière contrôlée

Dispositif de pompage intégré, le liquide excédent retombe dans le bidon

Coupe de trempage avec ressort

Dispositif pare-flammes dans la coupe de trempage

Disponible également en modèle poli avec poignée en aluminium

Accessoires à commander:

- Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1
- Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125
- Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence non polie	ROT- SP2
Volume	2 litres
Hauteur	330 mm
Diamètre (bidon/soucoupe)	131 / 120 mm
Filetage	1¼"
Poids	1,000 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	non
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Bec doseur ROT-D125 Bouchon fileté 1¼" K125
Pièces détachées	Coupe de trempage ROT-P2 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Mouilleur (5 litres)

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour humidifier, mouiller ou tremper des pièces, chiffons ou du papier d'une manière contrôlée

Dispositif de pompage intégré, le liquide excédent retombe dans le bidon

Coupe de trempage avec ressort

Dispositif pare-flammes dans la coupe de trempage

Disponible également en modèle poli avec poignée en aluminium

Accessoires à commander:

- Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1
- Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125
- Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence non polie	ROT- SP5
Volume	5 litres
Hauteur	267 mm
Diamètre (bidon/soucoupe)	120 / 260 mm
Filetage	1¼"
Poids	1,950 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316, 304/ 0,8 mm
Joint	PTFE
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Bouchon fileté 1¼ ROT-K125 Bec doseur de précision ROT-D125 Entonnoir droit sans filetage ROT-TR1
Pièces détachées	Coupe de trempage ROT-P5 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Mouilleur (10 litres)

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour humidifier, mouiller ou tremper des pièces, chiffons ou du papier d'une manière contrôlée

Dispositif de pompage intégré, le liquide excédent retombe dans le bidon

Coupe de trempage avec ressort

Dispositif pare-flammes dans la coupe de trempage

Disponible également en modèle poli avec poignée en aluminium

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1
Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125
Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence non polie	ROT- SP10
Volume	10 litres
Hauteur	373 mm
Diamètre (bidon/soucoupe)	120 / 260 mm
Filetage	1¼"
Poids	2,450 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316, 304/ 0,8 mm
Joint	PTFE
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Bouchon fileté 1¼ ROT-K125 Entonnoir droit sans filetage ROT-TR1
Pièces détachées	Coupe de trempage ROT-P10 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990

Récipients pour tremper

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour un trempage contrôlé de chiffons, par ex. dans des solvants pour nettoyer des pièces

Minimise la consommation

Le récipient garde bien sa position

Pare-flamme dans la coupe de trempage

Coupe de trempage avec ressort



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence non polie	ROT- TB4
Volume	4 litres
Hauteur	130 mm
Diamètre	260 mm
Poids	1,600 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Pare-flammes	oui
Code tarif de douane	73102990

Réipients pour lavage

Réipient en acier inoxydable de qualité et résistant épaisseur 0,8 mm

Pour un nettoyage sûr de pièces ou d'outils avec des liquides inflammables

Le couvercle se ferme automatiquement en cas d'incendie

Accessoires à commander:

Support pour lavage ROT-WK



RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence non polie	ROT- WB4
Volume	4 litres
Hauteur	130 mm
Diamètre	260 mm
Poids	1,400 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Accessoire	Support pour lavage ROT-WK
Code tarif de douane	73102990

Jerrican de sécurité (5 litres) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

Jerrican pour le stockage, le transvasement et le dosage de liquides inflammables en toute sécurité

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable massif

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB ROT-05KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-05KD
Volume	5 litres
Hauteur	310 mm
Largeur x longueur	130 x 200 mm
Filetage	1½"
Poids	1,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bouchon fileté 1½" ROT- K150
Pièces détachées	Bec doseur ROT-D150
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Jerrican de sécurité (10 litres) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

Jerrican pour le stockage, le transvasement et le dosage de liquides inflammables en toute sécurité
En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable massif

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB ROT-10KT

Accessoires à commander:

- Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2
- Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V
- Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15
- Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10KD
Volume	10 litres
Hauteur	380 mm
Largeur x longueur	130 x 280 mm
Filetage	1½"
Poids	2,500 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bouchon fileté 1½" ROT- K150
Pièces détachées	Bec doseur ROT-D150
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Jerrican de sécurité (20 litres) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

Jerrican pour le stockage, le transvasement et le dosage de liquides inflammables en toute sécurité
En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable massif

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Vis d'aération pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (20 litres) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB ROT-20KTL

Accessoires à commander:

- Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2
- Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V
- Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15
- Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-20KDL
Volume	20 litres
Hauteur	470 mm
Largeur x longueur	175 x 345 mm
Filetage	1½"
Poids	3,700 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bouchon fileté 1½" ROT- K150
Pièces détachées	Bec doseur ROT-D151
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
	Vis d'aération ROT-LM6
Code tarif de douane	73102990

Jerrican de sécurité (5 litres) avec bouchon fileté

Jerrican pour le stockage et le transvasement de liquides inflammables en toute sécurité
En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable massif

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)
Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté
homologation selon GGVSEB ROT-05KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2
Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V
Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15
Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération ROT-D150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-05KK
Volume	5 litres
Hauteur	310 mm
Largeur x longueur	130 x 200 mm
Filetage	1½"
Poids	1,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2 Entonnoir ROT-TR2V Bec verseur 1½" ROT-A15 Bec doseur D150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" K150 Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Jerrican de sécurité (10 litres) avec bouchon fileté

Jerrican pour le stockage et le transvasement de liquides inflammables en toute sécurité
En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable massif
Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)
Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB ROT-10KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2
Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V
Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15
Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération ROT-D150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-10KK
Volume	10 litres
Hauteur	380 mm
Largeur x longueur	130 x 280 mm
Filetage	1½"
Poids	2,500 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bec doseur D150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" K150
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990



Jerrican de sécurité (20 litres) avec bouchon fileté

Jerrican pour le stockage et le transvasement de liquides inflammables en toute sécurité
En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable massif

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (20 litres) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB ROT-20KTL

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération ROT-D150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-20KK
Volume	20 litres
Hauteur	470 mm
Largeur x longueur	175 x 345 mm
Filetage	1½"
Poids	3,700 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bec doseur ROT-D150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K150
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Jerrican de sécurité (5 litres) avec bec doseur à fermeture automatique et aération séparée

Jerrican pour le stockage, le transvasement et le dosage de liquides inflammables en toute sécurité
En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm - la poignée est également en acier inoxydable massif

Robinet de soutirage pour un usage en position horizontale et sans goutter

Vis d'aération ROT-LM6 pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB ROT-05KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-05KZ
Volume	5 litres
Hauteur	310 mm
Largeur x longueur	130 x 200 mm
Filetage	1½"
Poids	1,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bouchon fileté 1½" ROT-K150
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z150
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
	Vis d'aération ROT-LM6
Code tarif de douane	73102990

Jerrican de sécurité (10 litres) avec bec doseur à fermeture automatique et aération séparée

Jerrican pour le stockage, le transvasement et le dosage de liquides inflammables en toute sécurité
En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm - la poignée est également en acier inoxydable massif

Robinet de soutirage pour un usage en position horizontale et sans goutter

Vis d'aération ROT-LM6 pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-10KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10KZ
Volume	10 litres
Hauteur	380 mm
Largeur x longueur	130 x 280 mm
Filetage	1½"
Poids	2,500 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bouchon fileté 1½" ROT-K150
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z150
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
	Vis d'aération ROT-LM6
Code tarif de douane	73102990

Jerrican de sécurité (20 litres) avec bec doseur à fermeture automatique et aération séparée

Jerrican pour le stockage, le transvasement et le dosage de liquides inflammables en toute sécurité
En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm - la poignée est également en acier inoxydable massif

Robinet de soutirage pour un usage en position horizontale et sans goutter

Vis d'aération ROT-LM6 pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-20KTL

Accessoires à commander:

- Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2
- Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V
- Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15
- Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-20KZ
Volume	20 litres
Hauteur	480 mm
Largeur x longueur	175 x 345 mm
Filetage	1½"
Poids	3,700 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bouchon fileté 1½" ROT-K150
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z150
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
	Vis d'aération ROT-LM6
Code tarif de douane	73102990

Fût de sécurité (10 litres) avec bouchon fileté et soupape de compensation

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Réceptacle de grande stabilité empilable

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Disponible également comme Fût de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-10TZ

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-10K
Volume	10 litres
Hauteur	330 mm
Diamètre (avec anneau)	260 mm
Filetage	1½"
Poids	2,200 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti1.4571 / 0,8 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bec verseur 1½", ROT-A15
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K150 Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990



Fût de sécurité (25 litres) avec bouchon fileté et soupape de compensation

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,2 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Réceptacle de grande stabilité empilable

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Pare-flammes amovible dans l'orifice d'ouverture

Disponible également comme Fût de sécurité pour le transport (25 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-25TZ

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3
Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-25K
Volume	25 litres
Hauteur	540 mm
Diamètre (avec anneau)	315 mm
Filetage	1½"
Poids	6,400 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bec verseur 1½", ROT-A15
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K150 Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Fût de sécurité (50 litres) avec bouchon fileté et soupape de compensation

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,5 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Réceptacle de grande stabilité

Empilable ce qui permet par ex. de garder des fûts vides

Pare-flammes amovible

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-50K
Volume	50 litres
Hauteur	600 mm
Diamètre (avec anneau)	365 mm
Filetage	2" TPI
Poids	12,100 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 1,5 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 3,0 bar
Accessoire	Entonnoir ROT-TR3
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K200 Dispositif anti-flamme ROT-FS200
Code tarif de douane	73102990



Fût de sécurité (10 litres) avec robinet à fermeture automatique

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Réceptacle de grande stabilité

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du réceptacle

Levier en plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10Z
Volume	10 litres
Hauteur	330 mm
Diamètre (avec anneau)	260 mm
Filetage	1½", ¾"
Poids	2,480 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bec verseur 1½", ROT-A15
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z34 Bouchon fileté 1½" ROT-K151 Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Fût de sécurité (25 litres) avec robinet à fermeture automatique

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant , épaisseur 1,2 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité empilable

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Levier en plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Pare-flammes amovible

Disponible également comme Fût de sécurité pour le transport (25 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-25TZ

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3
Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-25Z
Volume	25 litres
Hauteur	540 mm
Diamètre (avec anneau)	315 mm
Filetage	1½", ¾"
Poids	6,540 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bec verseur 1½", ROT-A15
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z34 Bouchon fileté 1½" ROT-K151 Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Fût de sécurité (50 litres) avec robinet à fermeture automatique

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,5 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du réceptacle

Levier en plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Pare-flammes amovible

Réceptacle de grande stabilité

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-50Z
Volume	50 litres
Hauteur	600 mm
Diamètre (avec anneau)	365 mm
Filetage	2" TPI, 3/4"
Poids	12,200 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle de pression 3.0 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z34
	Bouchon fileté 2" ROT-K201
	Dispositif anti-flamme ROT-FS200
Code tarif de douane	73102990



Fût de sécurité (10 litres) avec robinet à fermeture automatique et jauge de niveau

Réceptier en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Réceptier de grande stabilité

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du réceptier

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et du transvasement

Levier en plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Pare-flammes amovible

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

RÖTMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10ZI
Volume	10 litres
Hauteur	330 mm
Diamètre (avec anneau)	260 mm
Filetage	1½", ¾"
Poids	2,780 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bec verseur 1½", ROT-A15
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z34 Bouchon fileté 1½" ROT-K151 Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Fût de sécurité (25 litres) avec robinet à fermeture automatique et jauge de niveau

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,2 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité – empilable

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et du transvasement

Pare-flammes amovible

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Levier plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Disponible également comme Fût de sécurité pour le transport (25 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-25TZ

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-25ZI
Volume	25 litres
Hauteur	540 mm
Diamètre (avec anneau)	315 mm
Filetage	1½", ¾"
Poids	7,450 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bec verseur 1½", ROT-A15
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z34 Bouchon fileté 1½" ROT-K151 Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990

Fût de sécurité (50 litres) avec robinet à fermeture automatique et jauge de niveau

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant – épaisseur 1,5 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le transvasement et le dosage

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et du transvasement

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Levier plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Pare-flammes amovible

Réceptacle de grande stabilité

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-50ZI
Volume	50 litres
Hauteur	600 mm
Diamètre (avec anneau)	365 mm
Filetage	2" TPI, 3/4"
Poids	12,900 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 1,5 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle de pression 3.0 bar
Accessoire	Entonnoir ROT-TR3
Pièces détachées	Robinet de soutirage ROT-Z34
	Bouchon fileté 2" ROT-K201
	Dispositif anti-flamme ROT-FS200
Code tarif de douane	73102990

Fût de sécurité (10 litres) avec bec doseur de précision à fermeture automatique et aération séparée

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Réceptacle de grande stabilité

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables – utilisable également pour le transvasement et le dosage

Pare-flammes amovible

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Vis d'aération permet une aération manuelle pendant l'utilisation

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10D
Volume	10 litres
Hauteur	340 mm
Diamètre (avec anneau)	260 mm
Filetage	1½"
Poids	2,250 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bouchon fileté 1½" ROT-K150
Pièces détachées	Bec doseur ROT-D151 Dispositif anti-flamme ROT-FS150 Vis d'aération ROT-LM6
Code tarif de douane	73102990

Fût de sécurité (10 litres) avec bec doseur de précision à fermeture automatique, aération séparée et jauge de niveau

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Réceptacle de grande stabilité

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables – utilisable également pour le transvasement et le dosage

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et du transvasement

Pare-flammes amovible

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d'ouverture approx. 0,3 bar)

Vis d'aération permet une aération manuelle pendant l'utilisation

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10DI
Volume	10 litres
Hauteur	340 mm
Diamètre (avec anneau)	260 mm
Filetage	1½"
Poids	2,450 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bouchon fileté 1½" K150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K151 Dispositif anti-flamme ROT-FS150 Vis d'aération ROT-LM6
Code tarif de douane	73102990

Bidon collecteur (10 litres) avec connexion 2"

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant – épaisseur 0,8 mm

Pour garder des liquides inflammables en toute sécurité

Réceptacle de grande stabilité

Accessoires à commander:

Entonnoir de sécurité avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement ROT-T2

Entonnoir de sécurité plat avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement ROT-T180

Bec verseur 2" pour bidons collecteurs ROT-A2

Dispositif anti-flamme avec connexion 2" ROT-FSA2

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10S
Volume	10 litres
Hauteur	330 mm
Diamètre (avec anneau)	260 mm
Filetage	2"
Poids	2,100 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	non
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-T2
	Entonnoir ROT-T180
	Bec verseur 2" ROT-A2
	Dispositif anti-flamme ROT-FSA2
Pièces détachées	Bouchon 2"-TriSure ROT-K2
Code tarif de douane	73102990

Bidon collecteur (10 litres) avec connexion 2" et jauge de niveau

Réceptacle en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour garder des liquides inflammables en toute sécurité

Réceptacle de grande stabilité

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et du transvasement

Accessoires à commander:

Entonnoir de sécurité avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement ROT-T2

Entonnoir de sécurité plat avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement ROT-T180

Bec verseur 2" pour bidons collecteurs ROT-A2

Dispositif anti-flamme avec connexion 2" ROT-FSA2

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10SI
Volume	10 litres
Hauteur	330 mm
Diamètre (avec anneau)	260 mm
Filetage	2"
Poids	2,400 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	non
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-T2
	Entonnoir ROT-T180
	Bec verseur 2" ROT-A2
	Dispositif anti-flamme ROT-FSA2
Pièces détachées	Bouchon 2"-TriSure ROT-K2
Code tarif de douane	73102990

Bidon de sécurité pour le transport (1 litre) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-01TV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1
Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P1
Bec doseur de précision à fermeture automatique 1/4" ROT-D125

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence non polie	ROT-01T
Volume	1 litre
Hauteur	235 mm
Diamètre	111 mm
Filetage	1 1/4"
Poids	0,650 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Coupe de trempage ROT-P1 Bec doseur ROT-D125
Pièces détachées	Bouchon fileté 1/4" ROT-K126 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Bidon de sécurité pour le transport (2 litres) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-02TV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P2

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence non polie	ROT-02T
Volume	2 litres
Hauteur	295 mm
Diamètre	131 mm
Filetage	1¼"
Poids	0,750 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Coupe de trempage ROT-P2 Bec doseur ROT-D125
Pièces détachées	Bouchon fileté 1¼" ROT-K126 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Bidon de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-05TV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P2

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence non polie	ROT-05T
Volume	5 litres
Hauteur	400 mm
Diamètre	165 mm
Filetage	1¼"
Poids	1,150 Kg
Matière / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR1 Bec doseur ROT-D125
Pièces détachées	Bouchon fileté 1¼" ROT-K126 Dispositif anti-flamme ROT-FS125
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-05KTV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération ROT-D150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-05KT
Volume	5 litres
Hauteur	310 mm
Largeur x longueur	130 x 200 mm
Filetage	1½"
Poids	1,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bec doseur ROT-D150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K152
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Jerrican de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-10KTV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération ROT-D150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-10KT
Volume	10 litres
Hauteur	380 mm
Largeur x longueur	130 x 280 mm
Filetage	1½"
Poids	2,500 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bec doseur ROT-D150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K152
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)



Jerrican de sécurité pour le transport (20 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-20KTLV)

Vis d'aération pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½" ROT-Z150

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" ROT-D151

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-20KTL
Volume	20 litres
Hauteur	470 mm
Largeur x longueur	175 x 345 mm
Filetage	1½"
Poids	3,700 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Robinet de soutirage ROT-Z150
	Bec doseur Rot-D151
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K152
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
	Vis d'aération ROT-LM12
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté et régulation de pression homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-05KTV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération ROT-D150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-05KTV
Volume	5 litres
Hauteur	310 mm
Largeur x longueur	130 x 200 mm
Filetage	1½"
Poids	1,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de régulation de pression	0.3 bar environ
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bec doseur ROT-D150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K152
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Jerrican de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté et régulation de pression homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-10KTV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération ROT-D150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10KTV
Volume	10 litres
Hauteur	380 mm
Largeur x longueur	130 x 280 mm
Filetage	1½"
Poids	2,500 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de régulation de pression	0.3 bar environ
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Bec doseur ROT-D150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K152
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Jerrican de sécurité pour le transport (20 litres) avec bouchon fileté et régulation de pression homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-20KTLV)

Vis d'aération pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½" ROT-Z150

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" ROT-D151

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-20KTLV
Volume	20 litres
Hauteur	470 mm
Largeur x longueur	175 x 345 mm
Filetage	1½"
Poids	3,700 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm
Finition	Poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de régulation de pression	0.3 bar environ
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Bec verseur 1½" ROT-A15
	Robinet de soutirage ROT-Z150
	Bec doseur Rot-D151
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K152
	Dispositif anti-flamme ROT-FS150
	Vis d'aération ROT-LM12
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Fût de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,2 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Construction solide

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-10TZV)

Vis d'aération pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½", rotatif ROT-A15

Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½" ROT-Z150

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-10TZ
Volume	10 litres
Hauteur	330 mm
Diamètre (avec anneau)	260 mm
Filetage	1½"
Poids	2,250 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bec verseur 1½", ROT-A15 Robinet de soutirage ROT-Z150
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K152 Dispositif anti-flamme ROT-FS150 Vis d'aération ROT-LM12
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Fût de sécurité pour le transport (25 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,2 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Construction solide, réceptif empilable

Dispositif pare-flammes amovible dans l'ouverture

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation (Référence ROT-25TZV)

Vis d'aération pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:


Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½" rotatif ROT-A15

Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½" ROT-Z150

Supports en bois ROT-LB2

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

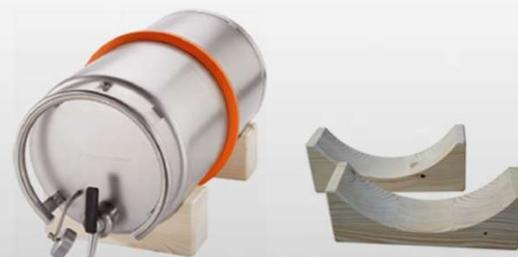

Référence	ROT-25TZ
Volume	25 litres
Hauteur	530 mm
Diamètre (avec anneau)	300 mm
Filetage	1½"
Poids	6,400 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	oui
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 0.4 bar
Accessoires	Entonnoir ROT-TR3 Bec verseur 1½", ROT-A15 Robinet de soutirage ROT-Z150 Supports ROT-LB2
Pièces détachées	Bouchon fileté 1½" ROT-K152 Dispositif anti-flamme ROT-FS150 Vis d'aération ROT-LM6
Code tarif de douane	73102990
Certificat	UN (ADR, RID, ...)

Fût de sécurité pour le transport (50 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,5 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Construction solide, réceptif empilable

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Vis d'aération pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Bouchon fileté 1½" ROT-K200
Dispositif anti-flamme 2" ROT-FSA2
Entonnoir ROT-T2
Bec verseur 2" ROT-A2
Entonnoir ROT-TR3

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-50T
Volume	50 litres
Hauteur	580 mm
Diamètre (avec anneau)	395 mm
Filetage	G2"
Poids	12,202 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301) / 1,5 mm
Finition	Polie
Joint	PTFE
Pare-flammes	non
Soupape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 3 bar
Accessoires	Bouchon fileté 1½" ROT-K200 Dispositif anti-flamme 2" ROT-FSA2 Entonnoir ROT-T2 Bec verseur 2" ROT-A2 Entonnoir ROT-TR3
Pièces détachées	Bouchon 2"-TriSure ROT-K2
Code tarif de douane	73101000
Certificat	UN (ADR, RID, ...)
Approbation UN	1A1/X/2,8/900/YY/E/PTXB-3082

Fût de sécurité pour le transport (100 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Réceptif en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,5 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d'emballage X)

Construction solide, réceptif empilable

Bouchon retenu par chaîne flexible pour éviter sa perte

Vis d'aération pour un apport manuel d'air lors de l'utilisation ou pour une compensation manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Bouchon fileté 1½" ROT-K200
Dispositif anti-flamme 2" ROT-FSA2
Entonnoir ROT-T2
Bec verseur 2" ROT-A2
Entonnoir ROT-TR3

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-100T / ROT-100T 304
Volume	100 litres
Hauteur	950/630 mm
Diamètre (avec anneau)	395/550 mm
Filetage	G2"
Poids	21,500 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316 / 304 / 1,5 mm
Finition	Polie
Joint	PTFE
Pare-flammes	non
Souape de compensation	non
Type de test / pression	Contrôle d'étanchéité 3 bar
Accessoires	Bouchon fileté 1½" ROT-K200 Dispositif anti-flamme 2" ROT-FSA2 Entonnoir ROT-T2 Bec verseur 2" ROT-A2 Entonnoir ROT-TR3
Pièces détachées	Bouchon 2"-TriSure ROT-K2
Code tarif de douane	73101000
Certificat	UN (ADR, RID, ...)
Approbation UN	1A1/X/2,8/900/YY/E/PTXB-3082



Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN 50, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 50

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK50-180 (hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TK50
Hauteur	125 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm
Filetage	DIN 50
Poids	0,60 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Accessoire	Funnel TES



Entonnoir de sécurité plat avec bouchon en plastique (PE) DIN 50, couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 50

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - disponible également comme entonnoir de sécurité ROT-TK50 (hauteur 125 mm)

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TK50-180
Hauteur	70 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	190 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm
Filetage	DIN 50
Poids	0,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Bidons en plastique DIN 50



Entonnoir de sécurité avec bouchon en plastique (PE) DIN 51, couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 51

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK51-180 (hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TK51
Hauteur	125 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm
Filetage	DIN 51
Poids	0,600 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Accessoire	Funnel TES
Pour les produits	Bidons en plastique DIN 51
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité plat avec bouchon en plastique (PE) DIN 51, couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 51

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK51 (hauteur 125 mm)

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TK51-180
Hauteur	70 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	190 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm
Filetage	DIN 51
Poids	0,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Bidons en plastique DIN 51
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité avec bouchon en plastique (PE) DIN 61, couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 61

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK61-180 (hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TK61
Hauteur	125 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm
Filetage	DIN 61
Poids	0,600 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Accessoire	Funnel TES
Pour les produits	Bidons en plastique DIN 61
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité plat avec bouchon en plastique (PE) DIN 61, couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 61

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK61 (hauteur 125 mm)

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TK61-180
Hauteur	70 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	190 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm
Filetage	DIN 61
Poids	0,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Bidons en plastique DIN 61
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité avec bouchon en plastique (PE) DIN 71, couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 71

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK71-180 (hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TK71
Hauteur	125 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm
Filetage	DIN 71
Poids	0,600 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Accessoire	Funnel TES
Pour les produits	Bidons en plastique DIN 71
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité plat avec bouchon en plastique (PE) DIN 71, couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 71

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK71 (hauteur 125 mm)

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TK71-180
Hauteur	70 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	190 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm
Filetage	DIN 61
Poids	0,650 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Bidons en plastique DIN 71
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Pour un remplissage sûr de tous les récipients avec connexion de 2"

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie - facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-T180 (hauteur 70mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-T2
Hauteur	125 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm
Filetage	2"
Poids	0,700 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 304 (1.4301)
Finition	Non poli
Joint	Alveocel
Pare-flammes	oui
Accessoire	Funnel TES
Pour les produits	Bidon collecteur ROT-10S Bidon collecteur ROT-10SI
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité plat avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de tous les récipients avec connexion de 2"

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - alternative: entonnoir de sécurité T2 (hauteur 125 mm)

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-T180
Hauteur	70 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	190 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm
Filetage	2"
Poids	0,800 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	PE
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Bidon collecteur ROT-10S Bidon collecteur ROT-10SI
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité avec filetage grossier (S56 x 4), avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Pour un remplissage sûr de tous les récipients avec connexion S56x4

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie - facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-T182 (hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TS
Hauteur	125 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm
Filetage	S56x4
Poids	0,700 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 304 (1.4301)
Finition	Non poli
Joint	PE
Pare-flammes	oui
Accessoire	Funnel TES
Pour les produits	Containers filetage S56x4
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir de sécurité plat avec filetage grossier (S56 x 4), avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de tous les récipients avec connexion S56x4

Pare-flammes pour éviter que le contenu s'enflamme en cas d'incendie, facilement extractible, par ex. pour le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - alternative: entonnoir de sécurité ROT-TS (hauteur 125 mm)

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-T182
Hauteur	70 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	190 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	45 mm
Filetage	S56x4
Poids	0,800 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301), inox 303 (1.4305)
Finition	Non poli
Joint	PE
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Containers filetage S56x4
Code tarif de douane	73269098



Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité

Entonnoir pour bidons de sécurité, en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage facile et sûr

Épaisseur de paroi 0,6 mm

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-TR1
Hauteur	120 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	23 mm
Poids	0,300 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), 0,6 mm
Finition	Non poli
Pare-flammes	non
Accessoire	Funnel ROT-TES
Pour les produits	Bidon de sécurité ROT-01D
	Bidon de sécurité ROT-02D
	Bidon de sécurité ROT-05D
	Bidon de sécurité ROT-01K
	Bidon de sécurité ROT-02K
	Bidon de sécurité ROT-05K
	Mouilleur ROT-SP1
	Mouilleur ROT-SP2
	Bidon de sécurité ROT-01T
	Bidon de sécurité ROT-02T
	Bidon de sécurité ROT-05T
Code tarif de douane	73269098

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité

Entonnoir pour jerricans de sécurité, en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage facile et sûr

Epaisseur de paroi 0,6 mm

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-TR2
Hauteur	120 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm
Poids	0,350 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), 0,6 mm
Finition	Non poli
Pare-flammes	non
Accessoire	Funnel ROT-TES
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-05KD
	Jerrican de sécurité ROT-10KD
	Jerrican de sécurité ROT-20KDL
	Jerrican de sécurité ROT-05KK
	Jerrican de sécurité ROT-10KK
	Jerrican de sécurité ROT-20KK
	Jerrican de sécurité ROT-05KZ
	Jerrican de sécurité ROT-10KZ
	Jerrican de sécurité ROT-20KZ
	Jerrican de sécurité ROT-05KT
	Jerrican de sécurité ROT-10KT
	Jerrican de sécurité ROT-20KTL
Code tarif de douane	73269098

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité

Entonnoir pour jerricans de sécurité, en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage facile et sûr

Protège le jerrican contre un débordement

Vissage étanche à l'air avec joint en PTFE

Epaisseur de paroi 0,6 mm

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-TR2V
Hauteur	120 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm
Poids	0,430 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1,4305), 0,6 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	non
Accessoire	Funnel ROT-TES
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-05KD
	Jerrican de sécurité ROT-10KD
	Jerrican de sécurité ROT-20KDL
	Jerrican de sécurité ROT-05KK
	Jerrican de sécurité ROT-10KK
	Jerrican de sécurité ROT-20KK
	Jerrican de sécurité ROT-05KZ
	Jerrican de sécurité ROT-10KZ
	Jerrican de sécurité ROT-20KZ
	Jerrican de sécurité ROT-05KT
	Jerrican de sécurité ROT-10KT
	Jerrican de sécurité ROT-20KTL
Code tarif de douane	73269098

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité

Entonnoir pour jerricans de sécurité, en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage facile et sûr

Épaisseur de paroi 0,6 mm

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Référence	ROT-TR3
Hauteur	120 mm
Diamètre tête de l'entonnoir	140 mm
Diamètre tube de l'entonnoir	34 mm
Poids	0,350 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), 0,6 mm
Finition	Non poli
Joint	PTFE
Pare-flammes	non
Accessoire	Funnel ROT-TES
Pour les produits	Fût de sécurité ROT-10K
	Fût de sécurité ROT-25K
	Fût de sécurité ROT-50K
	Fût de sécurité ROT-10Z
	Fût de sécurité ROT-25Z
	Fût de sécurité ROT-50Z
	Fût de sécurité ROT-10ZI
	Fût de sécurité ROT-25ZI
	Fût de sécurité ROT-50ZI
	Fût de sécurité ROT-10D
	Fût de sécurité ROT-10DI
	Fût de sécurité ROT-10TZ
	Fût de sécurité ROT-25TZ
Code tarif de douane	73269098

Support pour lavage

Panier en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un nettoyage sûr de pièces ou d'outils dans le récipient de lavage ROT-WB4

Le panier dispose de poignées pour mettre et retirer des pièces sans entrer en contact avec le produit de nettoyage

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-WK
Hauteur	10 mm
Diamètre	190 mm
Poids	0,20 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301)
Pour les produits	Récipients ROT-WB4
Code tarif de douane	73269097



Filtre pour entonnoir

Filtre en acier inoxydable de haute qualité et résistant aux produits chimiques

Retiens les particules et les instruments (par exemple barres d'agitation magnétique, pipettes, etc.)

Conçu pour être utilisé dans tous les entonnoirs en acier inoxydable mentionnés dans le tableau ci-dessous

Le clip sur le bord du filtre permet le de placer et le de retirer facilement

Fixation sûre dans le corps des entonnoirs

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-TES
Hauteur	2 mm
Diamètre	119 mm
Poids	0,036 kg
Matériel / épaisseur	Inox 316Ti (1.4571), Inox 316 (1.4401)
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Entonnoir ROT-TK50
	Entonnoir ROT-TK51
	Entonnoir ROT-TK61
	Entonnoir ROT-TK71
	Entonnoir ROT-T2
	Entonnoir ROT-TS
	Entonnoir ROT-TR1
	Entonnoir ROT-TR2
	Entonnoir ROT-TR2V
	Entonnoir ROT-TR3
Code tarif de douane	73269097



Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 litre

Coupe de trempage avec pompe en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un trempage sûr et économique de chiffons, par ex. avec des solvants pour nettoyer des pièces

Pour utiliser avec le bidon de sécurité de 1 litre comme mouilleur SP1, échange facile du pare-flammes du bidon de sécurité; la pompe est vissée ensuite sur le bidon

La coupe de trempage est dotée d'un ressort

Réduction maximale des odeurs, le liquide non nécessaire retourne dans le bidon

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-P1
Hauteur	260 mm
Diamètre	120 mm
Filetage	1¼"
Poids	0,350 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301)
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Bidon de sécurité ROT-01D
	Bidon de sécurité ROT-01K
	Mouilleur ROT-SP1
	Bidon de sécurité ROT-01T
Code tarif de douane	73102990



Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 2 litres

Coupe de trempage avec pompe en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un trempage sûr et économique de chiffons, par ex. avec des solvants pour nettoyer des pièces

Pour utiliser avec le bidon de sécurité de 2 litres comme mouilleur SP2, échange facile du pare-flammes du bidon de sécurité; la pompe est vissée ensuite sur le bidon

La coupe de trempage est dotée d'un ressort

Réduction maximale des odeurs, le liquide non nécessaire retourne dans le bidon

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-P2
Hauteur	320 mm
Diamètre	120 mm
Filetage	1¼"
Poids	0,400 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301)
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Bidon de sécurité ROT-02D
	Bidon de sécurité ROT-02K
	Mouilleur ROT-SP2
	Bidon de sécurité ROT-012
Code tarif de douane	73102990



Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 5 litres

Coupe de trempage avec pompe en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un trempage sûr et économique de chiffons, par ex. avec des solvants pour nettoyer des pièces

Pour utiliser avec le bidon de sécurité de 5 litres comme mouilleur SP5, échange facile du pare-flammes du bidon de sécurité; la pompe est vissée ensuite sur le bidon

La coupe de trempage est dotée d'un ressort

Réduction maximale des odeurs, le liquide non nécessaire retourne dans le bidon

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-P15
Hauteur	257 mm
Diamètre	120 mm
Filetage	G 1¼"
Poids	0,350 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301)
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Mouilleur ROT-SP5
Code tarif de douane	73102990



Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 10 litres

Coupe de trempage avec pompe en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un trempage sûr et économique de chiffons, par ex. avec des solvants pour nettoyer des pièces

Pour utiliser avec le bidon de sécurité de 10 litres comme mouilleur SP10, échange facile du pare-flammes du bidon de sécurité; la pompe est vissée ensuite sur le bidon

La coupe de trempage est dotée d'un ressort

Réduction maximale des odeurs, le liquide non nécessaire retourne dans le bidon

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

Référence	ROT-P10
Hauteur	363 mm
Diamètre	120 mm
Filetage	G 1¼"
Poids	0,550 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301)
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Mouilleur ROT-SP10
Code tarif de douane	73102990



Bec verseur 1½", rotatif

Bec verseur en acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour une vidange sûre des récipients

Bec verseur rotatif pour un positionnement individuel

Référence	ROT-A15
Hauteur	175 mm
Diamètre tube	28 mm
Filetage	1½"
Poids	0,270 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301), inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-05KD
	Jerrican de sécurité ROT-10KD
	Jerrican de sécurité ROT-20KDL
	Jerrican de sécurité ROT-05KK
	Jerrican de sécurité ROT-10KK
	Jerrican de sécurité ROT-20KK
	Jerrican de sécurité ROT-05KZ
	Jerrican de sécurité ROT-10KZ
	Jerrican de sécurité ROT-20KZ
	Fût de sécurité ROT-10K
	Fût de sécurité ROT-25K
	Fût de sécurité ROT-10Z
	Fût de sécurité ROT-25Z
	Fût de sécurité ROT-10ZI
	Fût de sécurité ROT-25ZI
	Fût de sécurité ROT-10D
	Fût de sécurité ROT-10DI
	Jerrican de sécurité ROT-05KT
	Jerrican de sécurité ROT-10KT
	Jerrican de sécurité ROT-20KTL
	Fût de sécurité ROT-10TZ
	Fût de sécurité ROT-25TZ
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bec verseur 2" pour bidons collecteurs

Bec verseur en acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour une vidange sûre des récipients

A utiliser avec les bidons collecteurs ROT-10S et ROT-10SI

Référence	ROT-A2
Hauteur	180 mm
Diamètre tube	40 mm
Filetage	2"
Poids	0,400 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 (1.4301)
Joint	PE
Pour les produits	Bidon collecteur ROT-10S Bidon collecteur ROT-10SI
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Robinet de soutirage à fermeture automatique 3/4"

Robinet en acier inoxydable de qualité et résistant

A utiliser avec les fûts de sécurité avec sortie située près du fond

Le robinet se ferme automatiquement après l'utilisation

Référence	ROT-Z34
Filetage	3/4"
Poids	0,220 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Pour les produits	Fût de sécurité ROT-10Z
	Fût de sécurité ROT-25Z
	Fût de sécurité ROT-50Z
	Fût de sécurité ROT-10ZI
	Fût de sécurité ROT-25ZI

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½"

Robinet en acier inoxydable de qualité et résistant

Idéal pour une utilisation avec les récipients en position horizontale

Le robinet se ferme automatiquement après l'utilisation

Référence	ROT-Z150
Filetage	1½"
Poids	0,170 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-05KZ
	Jerrican de sécurité ROT-10KZ
	Jerrican de sécurité ROT-20KZ
	Jerrican de sécurité ROT-20KTL
	Fût de sécurité ROT-10TZ
	Fût de sécurité ROT-25TZ
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½"

Bec doseur en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un dosage sûr de liquides

Pour tous les bidons de sécurité et de transport

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-D125
Filetage	1¼"
Poids	0,130 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Pour les produits	Bidon de sécurité ROT-01D
	Bidon de sécurité ROT-02D
	Bidon de sécurité ROT-5D
	Bidon de sécurité ROT-01K
	Bidon de sécurité ROT-02K
	Bidon de sécurité ROT-05K
	Mouilleur ROT-SP1
	Mouilleur ROT-SP2
	Bidon de sécurité ROT-01T
	Bidon de sécurité ROT-02T
	Bidon de sécurité ROT-05T
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération

Bec doseur en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un dosage sûr de liquides

Pour tous les jerricans de sécurité et de transport (le bec doseur peut être utilisé dans l'intérieur de l'entreprise)

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-D150
Filetage	1½"
Poids	0,170 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-05KD
	Jerrican de sécurité ROT-10KD
	Jerrican de sécurité ROT-05KK
	Jerrican de sécurité ROT-10KK
	Jerrican de sécurité ROT-20KK
	Fût de sécurité ROT-10K
	Jerrican de sécurité ROT-05KT
	Jerrican de sécurité ROT-10KT
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½"

Bec doseur en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un dosage sûr de liquides

Pour les récipients avec aération séparée

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-D151
Filitage	1½"
Poids	0,170 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-20KDL Fût de sécurité ROT-10D Fût de sécurité ROT-10DI Jerrican de sécurité ROT-20KTL
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les bidons de sécurité

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Avec soupape de compensation de pression

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-K125
Filitage	1¼"
Poids	0,080 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Pour les produits	Bidon de sécurité ROT-01D
	Bidon de sécurité 0ROT-2D
	Bidon de sécurité ROT-05D
	Bidon de sécurité ROT-01K
	Bidon de sécurité ROT-02K
	Bidon de sécurité ROT-05K
	Mouilleur ROT-SP1
	Mouilleur ROT-SP2
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bouchon fileté 1¼" pour bidon de sécurité pour le transport

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les bidons de sécurité de transport

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-K126
Filitage	1¼"
Poids	0,080 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	non
Pour les produits	Bidon de sécurité ROT-01T Bidon de sécurité ROT-02T Bidon de sécurité ROT-05T
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les bidons de sécurité

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Avec soupape de compensation de pression

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-K150
Filetage	1½"
Poids	0,180 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-05KD
	Jerrican de sécurité ROT-10KD
	Jerrican de sécurité ROT-20KDL
	Jerrican de sécurité ROT-05KK
	Jerrican de sécurité ROT-10KK
	Jerrican de sécurité ROT-20KK
	Jerrican de sécurité ROT-05KZ
	Jerrican de sécurité ROT-10KZ
	Jerrican de sécurité ROT-20KZ
	Fût de sécurité ROT-10K
	Fût de sécurité ROT-25K
	Fût de sécurité ROT-10D
	Fût de sécurité ROT-10DI
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bouchon fileté 1½" avec manette en plastique

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les fûts de sécurité

Avec soupape de compensation et manette en plastique pour une aération manuelle

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-K151
Filetage	1½"
Poids	0,180 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Pour les produits	Fût de sécurité ROT-10Z
	Fût de sécurité ROT-25Z
	Fût de sécurité ROT-10ZI
	Fût de sécurité ROT-25ZI
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bouchon fileté 1½" pour récipients de transport

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les jerricans et les fûts de transport

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-K152
Filetage	1½"
Poids	0,180 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	non
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-05KT Jerrican de sécurité ROT-10KT Jerrican de sécurité ROT-20KTL Fût de sécurité ROT-10TZ Fût de sécurité ROT-25TZ
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bouchon fileté 2" TPI avec soupape de compensation

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer le fût de sécurité ROT-50K

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-K200
Filetage	2" TPI
Poids	0,400 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Pour les produits	Fût de sécurité ROT-50K
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bouchon fileté 2" TPI avec manette en plastique

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les fûts de sécurité ROT-50Z et ROT-50ZI

Manette en plastique pour une aération manuelle

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence	ROT-K201
Filetage	2" TPI
Poids	0,400 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305)
Joint	PTFE
Soupape de compensation	oui (environ 0,3 bar)
Pour les produits	Fût de sécurité ROT-50Z Fût de sécurité ROT-50ZI
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Bouchon 2" TriSure

Bouchon 2"-TriSure pour fermer les bidons collecteurs de 10 l portant les références ROT-10S et ROT-10SI

Référence	ROT-K2
Filetage	2"
Poids	0,060 kg
Matériel / épaisseur	Inox 304 1.4301
Joint	PE
Soupape de compensation	non
Pour les produits	Bidon collecteur ROT-10S Bidon collecteur ROT-10SI
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Dispositif anti-flamme pour les bidons de sécurité

Pare-flammes en maille tamis d'acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques


Pour tous les bidons de sécurité et de transport

Echange facile

Pare-flammes sur la base du principe de Davy

Référence	ROT-FS125
Hauteur	100 mm
Poids	0,020 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305), Inox 304 (1.4301)
Pare-flammes	oui
Pour les produits	Bidon de sécurité ROT-01D
	Bidon de sécurité ROT-02D
	Bidon de sécurité ROT-05D
	Bidon de sécurité ROT- 01K
	Bidon de sécurité ROT-02K
	Bidon de sécurité ROT-05K
	Mouilleur ROT-SP1
	Mouilleur ROT-SP2
	Bidon de sécurité ROT-01T
	Bidon de sécurité ROT- 02T
	Bidon de sécurité ROT-05T
Code tarif de douane	73269097

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER

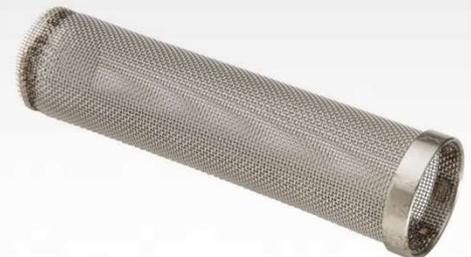

Dispositif anti-flamme pour jerricans et les fûts de sécurité de 10l / 25l

Pare-flammes en maille tamis d'acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour tous les jerricans de sécurité et de transport ainsi que pour les fûts de sécurité de 10l et de 25l

Echange facile

Pare-flammes sur la base du principe de Davy

Référence	ROT-FS150
Hauteur	205 mm
Poids	0,050 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305), Inox 304 (1.4301)
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-05KD
	Jerrican de sécurité ROT-10KD
	Jerrican de sécurité ROT-20KDL
	Jerrican de sécurité ROT-05KK
	Jerrican de sécurité ROT-10KK
	Jerrican de sécurité ROT-20KK
	Jerrican de sécurité ROT-05KZ
	Jerrican de sécurité ROT-10KZ
	Jerrican de sécurité ROT-20KZ
	Fût de sécurité ROT-10K
	Fût de sécurité ROT-25K
	Fût de sécurité ROT-10Z
	Fût de sécurité ROT-25Z
	Fût de sécurité ROT-10ZI
	Fût de sécurité ROT-25ZI
	Fût de sécurité ROT-10D
	Fût de sécurité ROT-10DI
	Jerrican de sécurité ROT-05KT
	Jerrican de sécurité ROT-10KT
	Jerrican de sécurité ROT-20KTL
	Fût de sécurité ROT-10TZ
	Fût de sécurité ROT-25TZ
Code tarif de douane	73269097

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Dispositif anti-flamme pour les fûts de sécurité de 50 l

Pare-flammes en maille tamis d'acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour les fûts de sécurité de 50 litres

Echange facile

Pare-flammes sur la base du principe de Davy

Référence	ROT-FS200
Hauteur	320 mm
Poids	0,090 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305), Inox 304 (1.4301)
Pour les produits	Fût de sécurité ROT-50K Fût de sécurité ROT- 50Z Fût de sécurité ROT-50ZI
Code tarif de douane	73269097

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Dispositif anti-flamme avec connexion 2"

Pare-flammes en maille tamis d'acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour les bidons collecteurs ROT-10S et ROT-10SI

A utiliser avec l'entonnoir ROT-T2

Pare-flammes sur la base du principe de Davy

Référence	ROT-FSA2
Hauteur	230 mm
Poids	0,250 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305), Inox 304 (1.4301)
Pour les produits	Bidon collecteur ROT-10S Bidon collecteur ROT-10SI
Code tarif de douane	73269097

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Vis d'aération M6

Vis d'aération en acier inoxydable de qualité et résistante

Pour une aération manuelle des récipients

Référence	ROT-LM6
Filitage	M6
Poids	0,010 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305), Inox 304 (1.4301)
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-20KDL
	Jerrican de sécurité ROT-05KZ
	Jerrican de sécurité ROT-10KZ
	Jerrican de sécurité ROT-20KZ
	Fût de sécurité ROT-10D
	Fût de sécurité ROT-10DI
	Fût de sécurité ROT-25TZ
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Vis d'aération M12

Vis d'aération en acier inoxydable de qualité et résistante

Pour une aération manuelle des récipients

Référence	ROT-LM12
Filitage	M12
Poids	0,030 kg
Matériel / épaisseur	Inox 303 (1.4305), Inox 304 (1.4301)
Pour les produits	Jerrican de sécurité ROT-20KTL Fût de sécurité ROT-10TZ
Code tarif de douane	84818099

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Supports en bois

Cales en bois

Pour une utilisation du fût de sécurité ROT-25TZ en position horizontale

La référence ROT-LB2 comporte 2 supports

Référence	ROT-LB2
Hauteur	100 mm
Surface de base	280 x 80 mm
Poids	1,100 kg
Matériel / épaisseur	Bois
Pour les produits	Fût de sécurité ROT-*25TZ
Code tarif de douane	44219098

RÖTZMEIER
SICHERHEITSBEHÄLTER



Les récipients de sécurité Rötzmeier

- protègent d'une manière sûre lors des manipulations de liquides inflammables et autres produits dangereux au laboratoire et dans l'industrie
- sont des récipients avec une très longue durée de vie
- sont résistants aux produits chimiques grâce à l'utilisation d'aciers inoxydables de haute qualité et de joints en PTFE (Polytétrafluoréthylène)
- avec protection anti-explosion: pare-flammes, soupapes de sécurité, ainsi que bec doseur pour un dosage fin et fermeture automatique
- conformes aux réglementations correspondantes (par ex. règles techniques pour les liquides inflammables (TRbF), TÜV, Factory Mutual (FM), etc.)
- sont recommandés par les associations professionnelles, par ex. dans règles pour le travail dans les laboratoires
- sont des produits de qualité "Made in Germany"



RÖTZMEIER

- Pour un transvasement sécurisé et le dosage de petites quantités de liquides inflammables sur le lieu de travail
- Fabriqués en acier inoxydable de 0,6 mm, joints en PTFE, poignée en aluminium avec peinture époxy
- Disponibles en version laboratoire (poli, comme sur la photo supérieure) ou en version entreprise (non poli, similaire au produit SP2 situé à gauche, numéro de réf. se terminant par un U).



